


Adsafe™ 4053 **Resucitador de bolsillo CPR**

INSTRUCCIONES DE USO

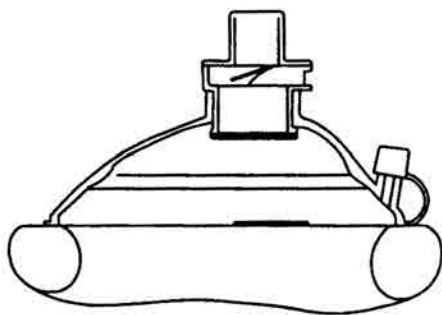

ADC[®]
AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION

CONTENIDO:

1. Máscara de cojín plegable con puerto de oxígeno.
2. Válvula de aire de una vía
3. Filtro de aire desechable
4. Máscara elástica para la cabeza
5. Guantes de examen sin polvo
6. Toallitas antimicrobianas para las manos


**** Todos los materiales son libres de látex.**


Uso previsto

Este resucitador de bolsillo para RCP está diseñado para que la boca oculte la ventilación de un adulto, niño o infante que no respira. También se utiliza como una barrera que dirigirá el aire espirado del paciente lejos del usuario. Este dispositivo solo debe ser utilizado por personas que hayan recibido una formación adecuada.

Precaución:

1. Este producto solo debe ser utilizado por personas que hayan recibido la capacitación e instrucciones adecuadas de personal médico calificado.
2. Conecte la línea de suministro de oxígeno si es necesario.
3. En presencia de altas concentraciones de oxígeno, una explosión puede ser causada por llamas vivas, o por aceite y grasa en el resucitador.

 **ADVERTENCIA:** Si se usa oxígeno, no fume ni lo use en presencia de equipos que produzcan chispas o llamas abiertas.

 **ADVERTENCIA:** La válvula de un solo uso es de un solo uso y DEBE ser desechada después del uso en un solo paciente.


Filtro: durante el desmontaje y el montaje, asegúrese de que la máscara esté en su posición plegada.

Desmontaje: Sostenga la máscara con una mano y sujete la carcasa del filtro entre su pulgar y dos dedos de la otra mano. Separar los dos tirando. *Deseche el filtro después de cada uso.*

Montaje: Presione y encaje el nuevo filtro firmemente en su lugar.




1. Retire la máscara y aplique los guantes de la caja.

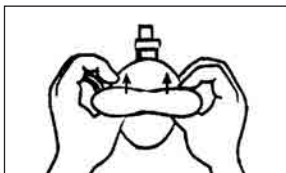

2. Despliegue la máscara y verifique que el filtro esté firmemente en su lugar.




3. Para adultos y niños: coloque el borde entre el labio inferior y la barbilla. Coloque la marca "nariz" sobre la nariz..

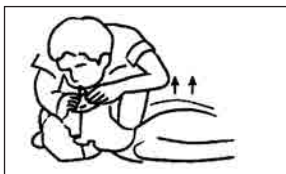

4. Selle como se muestra en la ilustración y sople lentamente en la válvula de una vía hasta que el pecho suba.




5. Retire la boca. Permita que el paciente espire. Repita según las pautas de RCP. Nota: Si el paciente vomita, retire la máscara y limpie las vías respiratorias del paciente.

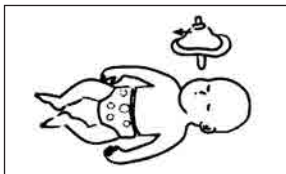

6. Para bebés: seguir adulto procedimiento de aplicación (3), excepto la dirección de la máscara hacia atrás para que el área de la nariz quede debajo de la barbilla



7. Use con oxígeno: la máscara de la correa para enfrentar como se indica para el uso apropiado por parte de adultos o bebés (3 o 6).

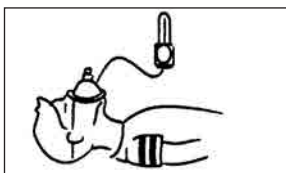

8. Abra la tapa de la boquilla de oxígeno y conecte la manguera de oxígeno a la boquilla. Seleccione el flujo de oxígeno. Ventilar si es necesario.

Limpieza: La mascarilla es reutilizable y fácil de limpiar. La válvula unidireccional se puede limpiar y reutilizar **SOLAMENTE** para el entrenamiento repetido del maniquí. Use la toallita con alcohol suministrada para limpiar la máscara y la válvula después del uso.

Deseche el filtro después de cada uso.

Lave y frote con agua tibia y jabón. Enjuague con agua limpia. Sumérgase durante 10 minutos en una solución de lejía: agua de uso doméstico de 1:64. Enjuague nuevamente y deje secar.

No pasteurice, hierva, gas, o máscara de autoclave de vapor.

Nota: Si la máscara se vuelve pegajosa, límpiela como se recomienda anteriormente. Use el paño con alcohol suministrado para limpiar la máscara y la válvula después del uso (con los modelos incluidos).

Almacenamiento: Siempre mantenga la máscara en el estuche cuando no esté en uso.

PRESUPUESTO

Dimensiones: 5.1" x 4.2" x 1.9" (130mm x 106mm x 48mm)

Temperatura de funcionamiento: -0.4°F ~ 104°F (-18°C ~ 40°C)

Temperatura de almacenamiento: -22°F ~ 122°F (-30°C ~ 50°C)

Humedad relativa de almacenamiento: <85%

Función de operación: Inspiración / Resistencia a la espiración menos
de 4.5" H2O at 25 LPM

Normas Reglamentarias: ISO 10651-4: Ventilador de pulmón
Parte 4: Requisito particular para los reanimadores operados por el operador.



ADC, 55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd., Unit 6, PO14 1TH
United Kingdom

Dist. por: ADC®

Hecho en Taiwán

tel: 631-273-9600

línea gratuita: 1-800-232-2670

fax: 631-273-9659

www.adctoday.com

correo electrónico: info@adctoday.com



Valvula y guantes
DE UN SOLO USO



Sin látex

