

# Diagnostix™

# ADSTATION™

Sistema de Diagnóstico Modular



# ADC® Diagnostix™ Adstation™ Instalación de pared

Su Diagnostix™ Adstation™ viene completo con el tablero de pared ensamblado, los mollies de montaje y los tornillos de madera para la instalación fácil.


1. Elija una ubicación para la ADC® Diagnostix™ Adstation™ cerca de la mesa de examen y una toma eléctrica. Vea la Figura 1.
2. Recomendamos una altura de 170 cm (67 pulgadas) desde el suelo hasta el borde superior de su panel de pared. Vea las Figuras 2-3.
3. **Uso de Mollies (Small Wallboard):** En la pared seleccionada, marque una línea horizontal usando un nivel, para indicar la parte superior de su wallboard. Mientras sostiene el tablero en la posición deseada, marque a través de los orificios de montaje la posición de los tornillos. Quite el tablero. Presione la punta del molle en la pared de yeso con un destornillador Phillips # 2 o una pistola de tornillo en los puntos marcados. Conduzca los mollies en el sentido de las agujas del reloj en el drywall hasta que se detenga rasante con la superficie externa de la pared.



Vuelva a colocar el tablero sobre los anclajes y asegure el tablero mediante la inserción de tornillos y el apriete. Asegúrese de revisar el nivel antes de instalar todos los tornillos de montaje. Utilice las tapas roscadas incluidas en la parte superior de cada tornillo una vez que estén firmemente apretadas para terminar.

**4. Uso de pernos (panel de pared grande):** Ubique y marque los montantes en la pared seleccionada. Marque una línea horizontal (aprox. 67 pulgadas - 170 cm) desde el suelo usando un nivel, para indicar la parte superior de su tablero. Centrar los orificios en el primer perno y marcar. Mientras sostiene el tablero en la posición deseada, utilice los tornillos de madera suministrados y asegure las esquinas superiores en la pared / espárrago, mientras comprueba que el tablero está nivelado. Repita el procedimiento para todos los tornillos de montaje. Utilice las tapas roscadas incluidas en la parte superior de cada tornillo una vez que estén firmemente apretadas, para terminar.

**5. Módulo Conectividad:** Para añadir módulos de extensión adicionales, deben ser unidos eléctricamente con la estación del transformador antes de montarla en el tablero.

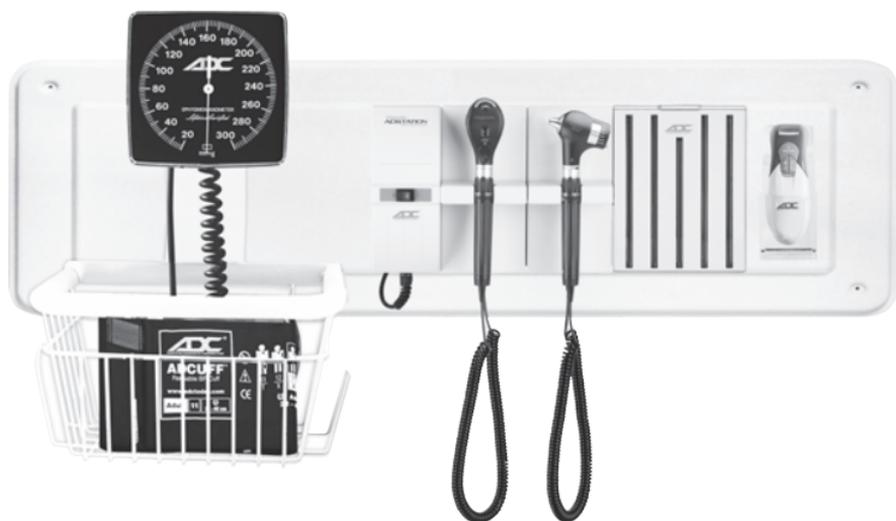

Con el cable de conexión del módulo adjunto, enchufe un lado del conector en la toma del módulo del transformador situado en el panel del transformador del lado derecho detrás de la puerta corredera.


Enchufe el extremo opuesto en el contacto del módulo de extensión, ubicado en la puerta corredera del panel lateral izquierdo.

A medida que agrega módulos adicionales, cada uno debe conectarse de manera similar utilizando los cables de conexión adicionales para cada módulo.

Sujete el exceso de cableado en cada extensión para asegurar un ajuste de lado a lado en cada módulo de extensión.


**PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que al conectar el cable de conexión, los 4 contactos de la toma estén conectados de forma positiva a los 4 contactos de la regleta de contactos (Figura 4).

**6. Montaje de los módulos Adstation™:** Una vez que todos los módulos estén conectados eléctricamente, ahora puede colocar cuidadosamente el transformador y los módulos adicionales en las clavijas de montaje de la pared. Asegúrese de que cada módulo se bloquea firmemente en una posición hacia abajo.

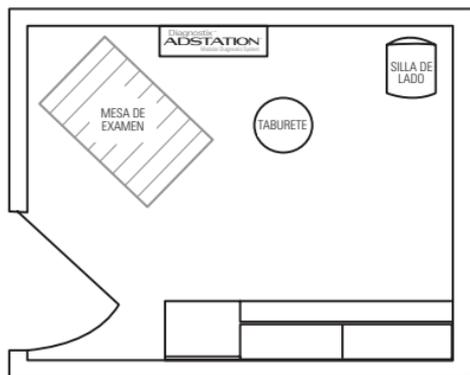


(Figura 1)

## Tablero Pequeño

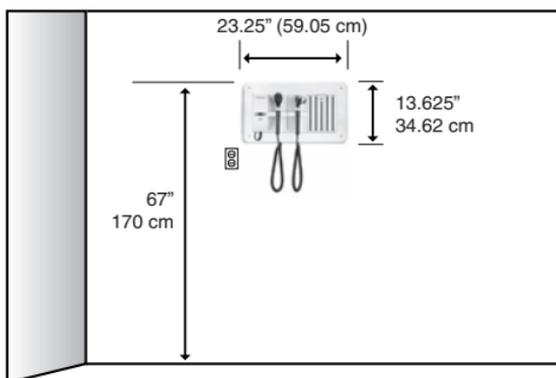


(Figura 2)

## Tablero Grande

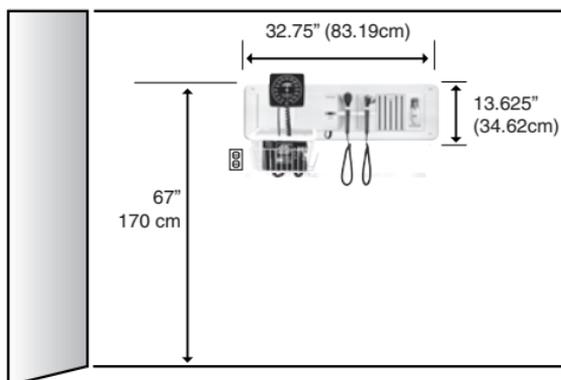

(Figura 3)

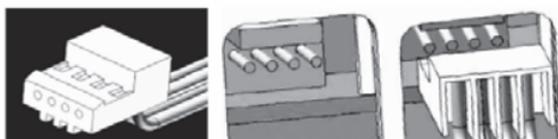

(Figura 4)