

Diagnostix™

ADSTATION

Sistema Diagnostico Modulare™

Istruzioni per l'allungamento Specula

Dopo aver applicato il modello di perforazione a specula nella posizione desiderata sulla parete, forare i 2 fori appropriati (diametro da 5,556 mm e profondità da 32 mm) come indicato. Spingere i molli in dotazione fino a quando non entrano nei fori di foratura nel muro.

Mettere i manicotti distanziati forniti in dotazione (1) sulla cupola (2) del supporto (3).

Ora le viti devono essere spinte nei fori previsti (4) nel supporto (3).


Posizionare il supporto sulla parete in modo che le viti si allineino con le spine e avvitarle in modo stretto.

Quando il supporto è saldamente posizionato sulla parete, il coperchio deve essere fissato al supporto come segue.

Posizionare l'involucro sul supporto in modo che le scanalature T (5) siano esattamente sopra le guide della scanalatura a T (6), quindi il rivestimento dovrebbe essere spinto uniformemente all'indietro fino a che non si avvicina alla posizione. Il rivestimento dovrebbe essere di livello con le finestre di visualizzazione del supporto.

Posizionare il coperchio (7) nella posizione prevista (8).

Ora la speculazione può essere riempita come desiderata.

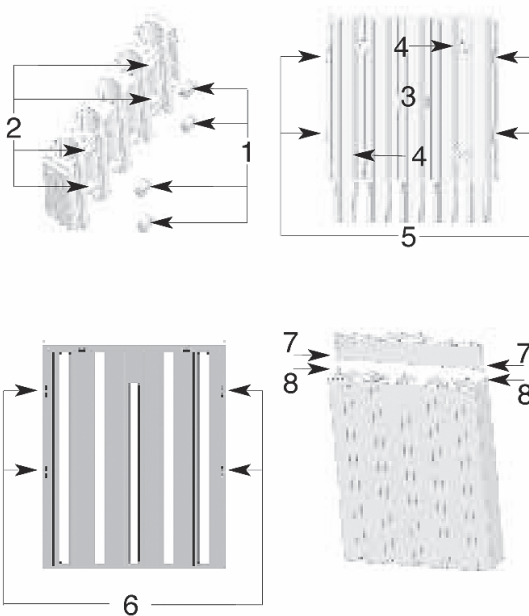


ADC
 55 Commerce Drive
 Hauppauge, NY 11788


ADC (UK) Ltd.
 Unit 6, PO14 1TH
 United Kingdom


 Consulta le istruzioni
 per l'uso


 Tipo di applicazione BF



IB p/n 93-5630-00

Fatto in Germania
 Ispezionato e confezionato negli Stati Uniti

tel: 631-273-9600
 gratis: 1-800-232-2670
 fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
 email: info@adctoday.com



Stampato negli Stati Uniti