

# Diagnostix™ ADSTATION

Sistema de Diagnóstico Modular™

---

## Instrucciones de Montaje de la Extensión de la Especulación

Después de grabar la plantilla de perforación de especulaciones en la posición deseada en la pared, taladre los 2 orificios apropiados (5,556 mm) de diámetro y 1,25 "(32 mm) de profundidad como se indica. Pulse los molinillos suministrados hasta el tope entrar en los agujeros de perforación en la pared.

Colocar los manguitos distanciadores suministrados (1) en la cúpula (2) del soporte (3).

Los tornillos deben ser empujados en los orificios provistos (4) en el soporte (3).


Coloque el soporte en la pared para que los tornillos se alineen con los tapones y atorníllelos firmemente.

Cuando el soporte está firmemente en su lugar en la pared, la carcasa debe fijarse al soporte como sigue.

Coloque la carcasa en el soporte de modo que las ranuras en T (5) se encuentren exactamente sobre las guías de ranura en T (6), la carcasa debe ahora empujarse uniformemente hacia atrás hasta que encaje en su posición. La carcasa debe estar nivelada con las ventanas de visualización del soporte.

Coloque la tapa (7) en el lugar previsto (8).

Los especulos se pueden llenar ahora como se desee.

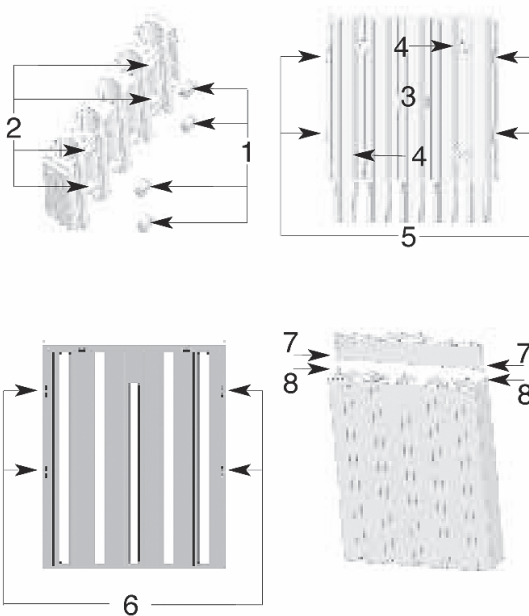

 ADC  
55 Commerce Drive  
Hauppauge, NY 11788

 ADC (UK) Ltd.  
Unit 6, PO14 1TH  
United Kingdom

 Consultar las instrucciones de uso

 Pieza aplicada tipo BF



IB p/n 93-5630-00

Hecho en Alemania  
Inspeccionado y embalado en los EE.UU.

tel: 631-273-9600  
sin cargo: 1-800-232-2670  
fax: 631-273-9659

[www.adctoday.com](http://www.adctoday.com)

Correo electrónico: [info@adctoday.com](mailto:info@adctoday.com)



Impreso en EE.UU.