


# Montageanleitung für PROSCOPE™ Lehr Stethoskope (Modelle # 671 und # 661)

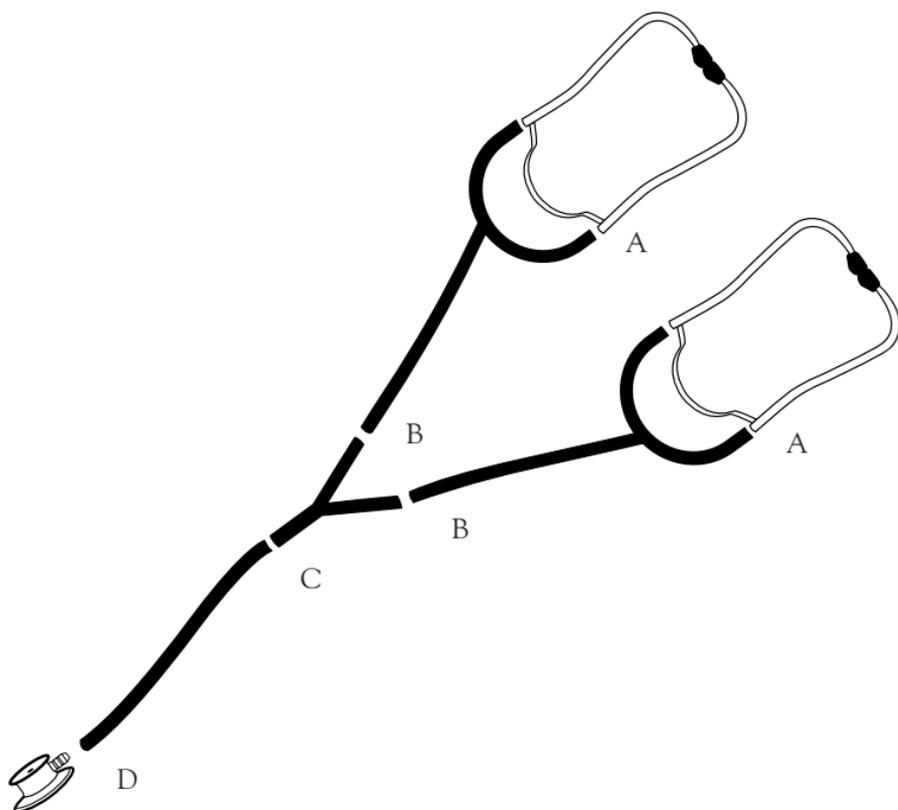

## MONTIEREN

- A. Befestigen Sie den "Y" -Schlauch an jedem Satz der Binaurals (660-05), wie in der Abbildung gezeigt.
- B. Befestigen Sie das freie Ende jedes "Y" -Schlauchs am Doppelpaarende des "Y" -Anschlusses (# 611-20).
- C. Verbinden Sie ein Ende des geraden Rohrs (# 671-05TBK) mit dem einzelnen Ende des "Y" -Anschlusses.
- D. Verbinden Sie das verbleibende Ende des geraden Schlauches mit dem Schaft des Bruststücks (# 660-01 oder # 670-01).

Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchverbindungen fest sind.

# PROSCOPE™ Lehr Stethoskope

(Modelle # 671 und # 661)

## Ersatzteile Enthalten

Artikelnummer	Beschreibung	Menge
660-01	PROSCOPE™ Brustharnisch	1*
670-01	PROSCOPE™ Doppelkopfbrustharnisch	1*
611-20	"Y" -Anschluss	1
671-05TBK	PVC-Schlauch, gerade, 10 ", schwarz	1
660-05T	PVC "Y" Schlauch, 22 "	2
660-05	Binaurale	2

**\*HINWEIS:** PROSCOPE™ Modell # 671 enthält nur das Bruststück 670-01  
PROSCOPE™ Modell # 661 enthält nur das Bruststück 660-01

### Für australische Verbraucher

Unsere Waren werden mit Garantien geliefert, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem größeren Ausfall und Ersatz eines anderen vorhersehbaren Schadens. Sie sind auch berechtigt, die Ware reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der Fehler kein schwerwiegender Fehler ist.



ADC  
55 Commerce Drive  
Hauppauge, NY 11788



ADC (UK) Ltd.  
Unit 6, PO14 1TH  
United Kingdom

tel: 631-273-9600  
1-800-232-2670  
fax: 631-273-9659



Achtung, Siehe  
Gebrauchsanweisung.

[www.adctoday.com](http://www.adctoday.com)  
email: [info@adctoday.com](mailto:info@adctoday.com)

