

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Diagnostix Clock Aneroids

Muraux (750W) et Mobiles (752M)




Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur www.adctoday.com/register

Pour toute question, commentaire ou suggestion, appelez-nous gratuitement au:
1-800-ADC-2670

ou rendez-vous sur:
www.adctoday.com/feedback

Assemblage du Support Mobile

1. Avec la base posée sur le côté, fixez le tube extérieur vertical à la base à l'aide de la longue vis hexagonale de 6 mm et de la rondelle. Serrez avec la grande clé hexagonale fournie. Serrez le matériel aussi fermement que possible. (Afin d'éviter tout desserrage, vérifiez périodiquement que le matériel reste bien serré.) Remettez la base en position verticale.
2. Insérez le tube intérieur en acier inoxydable dans le tube extérieur, l'extrémité ouverte vers le haut. Assurez-vous que le ressort amortisseur est à l'intérieur du tube extérieur et serrez.
3. Fixez le panier métallique à la plateforme à l'aide de deux vis hexagonales de 3 mm. Serrez avec la petite clé hexagonale fournie.

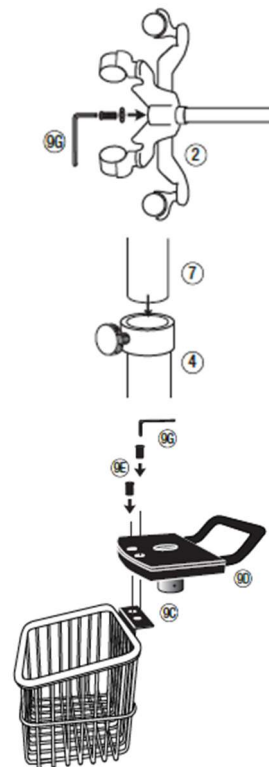

4. Fixez le support du manomètre (avec manomètre fixé) à la plateforme à l'aide d'une vis hexagonale courte de 6 mm et d'une rondelle. Serrez avec la grande clé hexagonale.




5. Placez l'ensemble composé du manomètre, du panier de rangement du brassard et de la plateforme sur le dessus du tube intérieur en acier inoxydable, en vous assurant que le tube s'insère complètement dans le collier. Utilisez le dispositif de serrage et la petite clé hexagonale comme indiqué.

6. Raccordez le tube spiralé à l'entrée du manomètre.
(Remarque : le raccordement du tube spiralé peut être difficile ; humidifiez-le avec de l'eau savonneuse si nécessaire.) Reportez-vous au livret intitulé Diagnostix Aneroids: Pocket, Palm, Clock Type (9350N-00) pour les instructions d'utilisation de l'appareil.

Liste des pièces

Réf.	N° d'article	Description
1	972-101	Vis hexagonale longue 6 mm et rondelle
2	972-080W	Base
3A	972-106-1	Roulettes simples (3)
3B	972-106L-1	Roulettes simples verrouillables (2)
4	972-107W	Tube extérieur, blanc hiver
5	972-108	Bouton
6	972-109	Ressort
6A	972-107A	Joint
7	972-110	Tube intérieur
8	972-111	Dispositif de serrage
9A	752-113N	Support du manomètre
9B	752-114	Vis hexagonale courte 6 mm et rondelle
9C	752-119W	Panier de rangement du brassard, blanc
9D	752-117W	Plateforme, blanc
9E	752-118W	Vis hexagonale 3 mm (2), argent
9F	752-116	Grande clé hexagonale 6 mm
9G	752-117	Petite clé hexagonale 3 mm

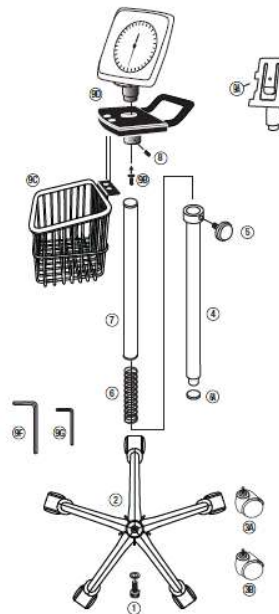

Montage Mural

Matériel inclus

- Deux vis, Deux chevilles



Outils nécessaires


- Tournevis cruciforme moyen, Marteau, Perceuse avec mèche de 3/16 po

Instructions

1. Déballez le tensiomètre anéroïde mural et l'ensemble panier, puis déterminez l'emplacement et la hauteur souhaités.
2. Découpez le gabarit de perçage (ci-dessous) et positionnez-le au centre de l'emplacement choisi. Utilisez un crayon pour marquer les deux trous de vis.
3. À chaque marque, percez un trou de 3/16 po d'environ 7/8 po de profondeur. Utilisez une mèche pour maçonnerie si vous percez du carrelage en céramique.
4. À l'aide du marteau, enfoncez doucement les chevilles dans les trous jusqu'à ce qu'elles soient affleurantes au mur.
5. Vissez les vis fournies directement dans les chevilles en laissant dépasser environ 1/8 po.
6. Positionnez l'ensemble du tensiomètre au-dessus des vis, puis guidez les têtes de vis dans les ouvertures en trou de serrure à l'arrière.
7. Faites glisser l'ensemble vers le bas pour le verrouiller en place.

Remarque: Si le matériel de montage fourni ne convient pas à votre installation, choisissez un matériel de taille et de type appropriés afin de fixer solidement l'instrument au mur.

Gabarit de perçage pour montage mural

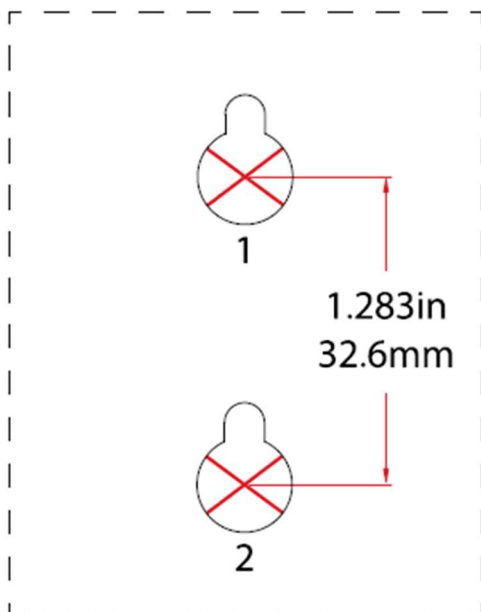

55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
Customer Service: 1-800-ADC-2670
Voice: 1-631-273-9600
Fax: 1-631-273-9659
email: info@adctoday.com
<http://www.adctoday.com>

IB p/n: 93521B-00 - rev 4 (05/01/2026)