


Note Speciali sull'installazione

COMPATIBILITÀ DEL TRASFORMATORE

Trasformatore (Lato posterior)

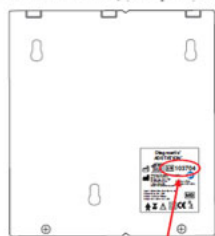

NUMERO DI SERIE

Se è stata acquistata un'unità di espansione da utilizzare con un trasformatore Adstation più datato, verificare il numero di serie del trasformatore prima dell'installazione. L'unità di espansione contenuta in questa spedizione è compatibile esclusivamente con un trasformatore il cui numero di serie sia 100000 o superiore. L'utilizzo con un trasformatore meno recente causerà danni.

Se questo acquisto include sia un trasformatore che un modulo di espansione, la compatibilità è già stata verificata.

CAVO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dopo aver collegato i moduli con il cavo elettrico (vedere le Istruzioni di installazione del wallboard), assicurarsi che il cavo in eccesso sia riposto saldamente all'interno del telaio del modulo prima del montaggio a parete o sul wallboard.



Garanzia: I trasformatori e i moduli di espansione Diagnostix Adstation sono garantiti per cinque anni dalla data di acquisto. La garanzia non si applica a danni causati da manipolazione impropria, incidenti, uso improprio o alterazioni apportate allo strumento da terzi. I danni causati dal collegamento di moduli di espansione incompatibili non sono coperti; si prega di verificare la compatibilità di tutti i componenti prima dell'installazione. La garanzia è valida solo dopo la registrazione del prodotto online all'indirizzo: www.adctoday.com/support/warranty-registration.



American Diagnostic Corporation
55 Commerce Drive, Hauppauge, NY 11788

tel: 631-273-9600
toll free: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com

IB p/n 93-5699-00 rev 4 (05/06/24)

Per registrare il prodotto, visitare il sito
www.adctoday.com
e seguire i link

Per domande, commenti o suggerimenti,
chiamare negli U.S.A. il numero verde
1-800-ADC-2670

Stampato negli U.S.A.