


DIAGNOSTIX™ 922

- SCHEMA
- ELENCO DELLE PARTI



922 UNITÀ MERCURY DI DESKTOP DIAGNOSTIX™

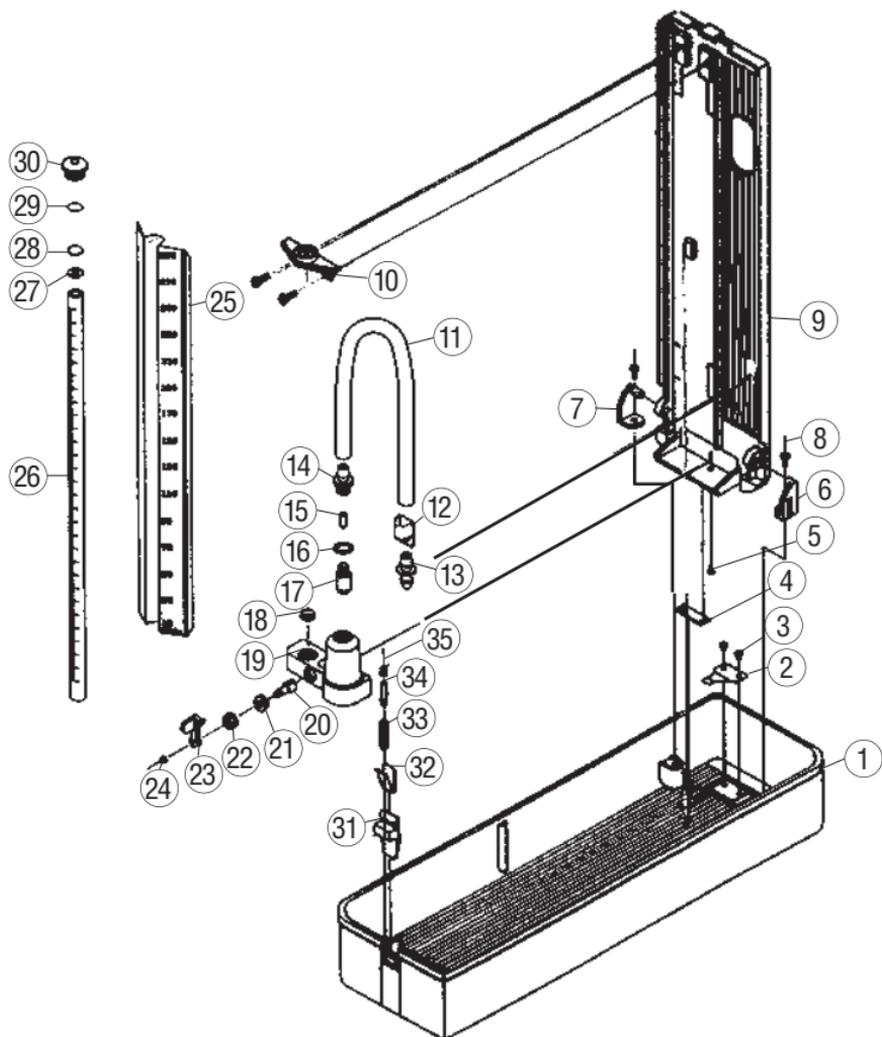

922 UNITÀ MERCURY DI DESKTOP DIAGNOSTIX™

Riferimento#	Articolo#	Descrizione
1	922-101	Custodia inferiore
2	922-102	Piastra di bloccaggio della copertura
3	922-103	Viti di fissaggio (2)
4	922-104	Catch di blocco di copertura
5	922-105	Vite di serbatoio (1)
6	922-106	Cerniera di copertura, Destra
7	922-107	Cerniera di copertura, a sinistra
8	922-108	Viti a cerniera (2)
9	922-109	Coperchio
10	922-110	Staffa della piastra di scala
11	922-111	Tubo di alimentazione del serbatoio (esterno)
12	922-112	Guida del tubo
13	891	Set di connettori Luer, Metallo
14	922-114	Reservoir connettore
15	922-115	Spina filtro serbatoio
16	922-116	Guarnizione del connettore serbatoio
17	922-117	Tubo di alimentazione del serbatoio (Inner)
18	922-118	Guarnizione in gomma
19	922-119	Assemblaggio del serbatoio
20	922-120	Serbatoio di blocco del serbatoio
21	922-121	Boccola
22	922-122	Vite di bloccaggio
23	922-123	Leva di bloccaggio
24	922-124	Dado esagonale della leva di bloccaggio
25	922-125	Piastra di scala
26	922-126	Tubo in plastica graduata di plastica, 4mm
27	922-127	Guarnizione in gomma
28	922-128	Filtro a spina
29	922-129	Diaframma
30	922-130	vite
31	922-131	Pulsante di rilascio
32	922-132	bottoni a molla
33	922-133	Molla del pistone
34	922-134	tuffatore
35	922-135	Vite a stantuffo

COLLEGARE IL SISTEMA DI INFLAZIONE A MANOMETRO

Rimuovere il tappo rosso che sigilla il serbatoio contenente mercurio. Fissare saldamente l'estremità libera del tubo del serbatoio nell'entrata dell'aria. Salvare il tappo rosso di sicurezza per un uso successivo. Nel trasporto di mercurio si consiglia di sostituire il tappo di sicurezza rosso.

Si prega di notare: è normale che le gocce di mercurio residuo accumulino attorno all'entrata di aria sotto il tappo di sicurezza rosso durante il trasporto.

Avvertenza: *Prima di trasportare questo strumento, il mercurio deve essere immagazzinato nel serbatoio e il blocco del serbatoio DEVE essere commutato in posizione di spegnimento per impedire la fuoriuscita di mercurio.*

PER ISTRUZIONI SUL DISASSEMBLAGGIO DELL'UNITÀ FARE RIFERIMENTO ALLO SCHEMA SCHEMATICO ALLEGATO E ALLE ISTRUZIONI PER L'ACCOMPAGNAMENTO.

NOTA BENE: *MERCURY IS TOXIC. MERCURY SECURE IN UN RISERVATO PRIMA DELL'UNITÀ DI SERVIZIO. SEMPRE INDIETRO ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO (GUANTI E GUANTI) QUANDO È PULIZIA O SERVIZIO L'UNITÀ. PULIRE QUALSIASI MERCURY SPILLED PROMPTLY UTILIZZANDO APPARTI DI CONCESSIONE MERCURY APPROVATI. I TECNICI DI SERVIZIO SOLTANTO IDENTIFICATI DOVREBBERO ATTEMPTARE AL SERVIZIO DELL'UNITÀ. CONSULTARE IL MANUALE COMPLETO ENTITLATO "SOLO IN CASO" PER PROCEDURE IN CUI SI RIVOLGONO CON UNA SPILLO MERCURY.*

Per registrarti, visita il sito www.adctoday.com/register

PER DOMANDE, COMMENTI O SUGGERIMENTI CHIAMATE GRATUITAMENTE:

1-800-ADC-2670

o visitare il sito www.adctoday.com/feedback

Questo manuale è disponibile online in una varietà di lingue, seguire i link per le opzioni linguistiche.

www.adctoday.com/care



ADC
55 Commerce Drive
Hauppauge, NY 11788
U.S.A.

tel: 631-273-9600
gratis: 1-800-232-2670
fax: 631-273-9659

www.adctoday.com
email: info@adctoday.com