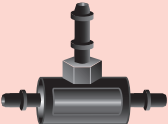

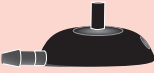
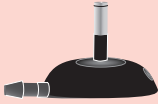


CUFF-KONNEKTIVITÄT

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer neuen ADC® Ersatzmanschette für digitale Blutdruckmessgeräte. Sie haben möglicherweise 2 Anschlüsse erhalten. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie das folgende Diagramm, um den richtigen Anschluss auszuwählen, der mit Ihrem spezifischen BP-Monitor verwendet werden soll. Beim Anschließen der Schläuche an den entsprechenden Anschluss eine leichte Drehbewegung ausführen und sicherstellen, dass der Schlauch und der Anschluss fest sitzen. Verwenden Sie die gleiche leichte Drehbewegung, wenn Sie den Stecker in den Monitor stecken.

WICHTIG: Die Verwendung des falschen Anschlusses für Ihren spezifischen Monitor kann zu einem Messfehler führen. Schlagen Sie in der Gebrauchsanweisung Ihres Blutdruckmessgeräts nach, um den für Ihr Modell spezifischen Manschettenanschluss zu erhalten.

MONITOR MODELL	VERBINDER	STECKVERBINDER	
6012, 6012N	897CN-1		
6013	897CN-2		
6014	897CN-2		
6017	897CN-2		
6021, 6021N	897CN-2		
6022, 6022N	897CN-2		
6023, 6023N	897CN-2		
6021NSA	897CN-5		
6021NSA rev 1	897CN-5N		